

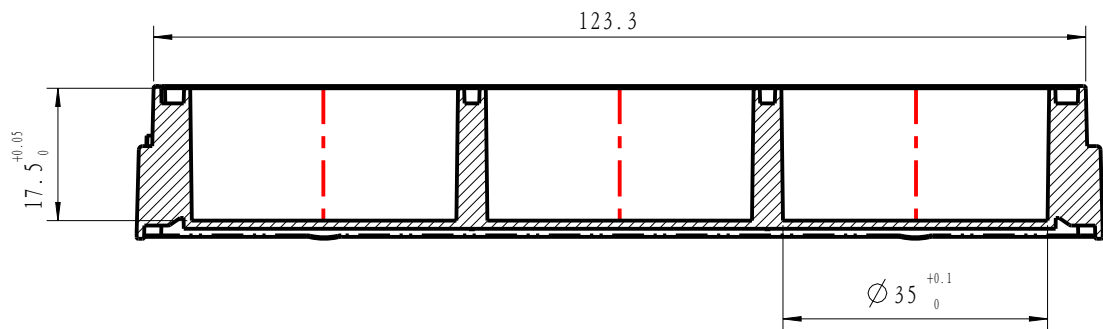
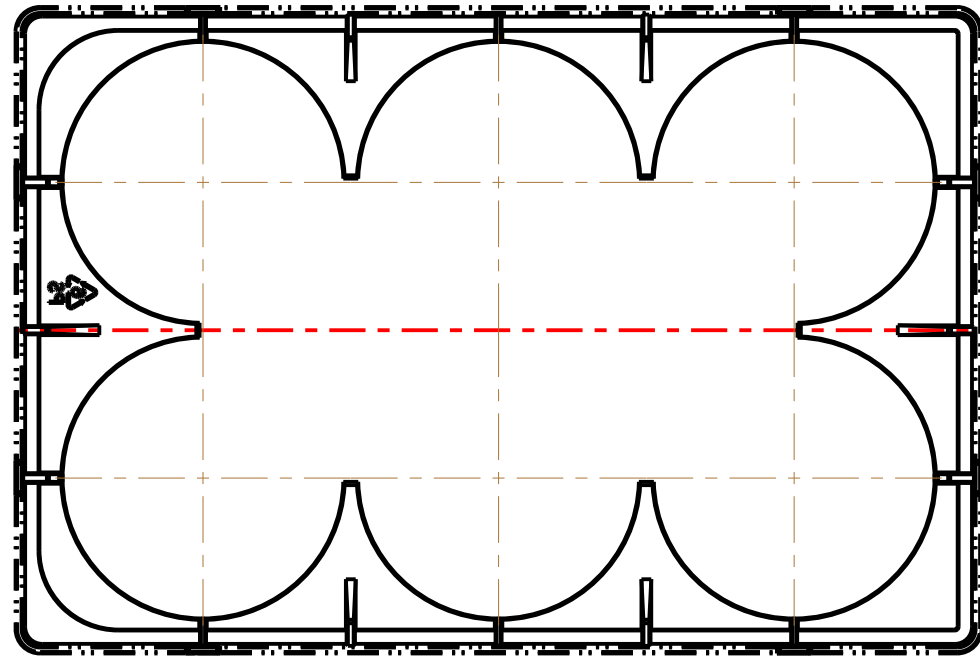
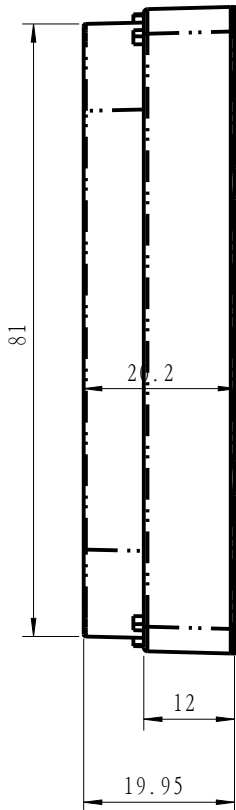


版次	设变内容	设变日期
△		
△		
△		
△		

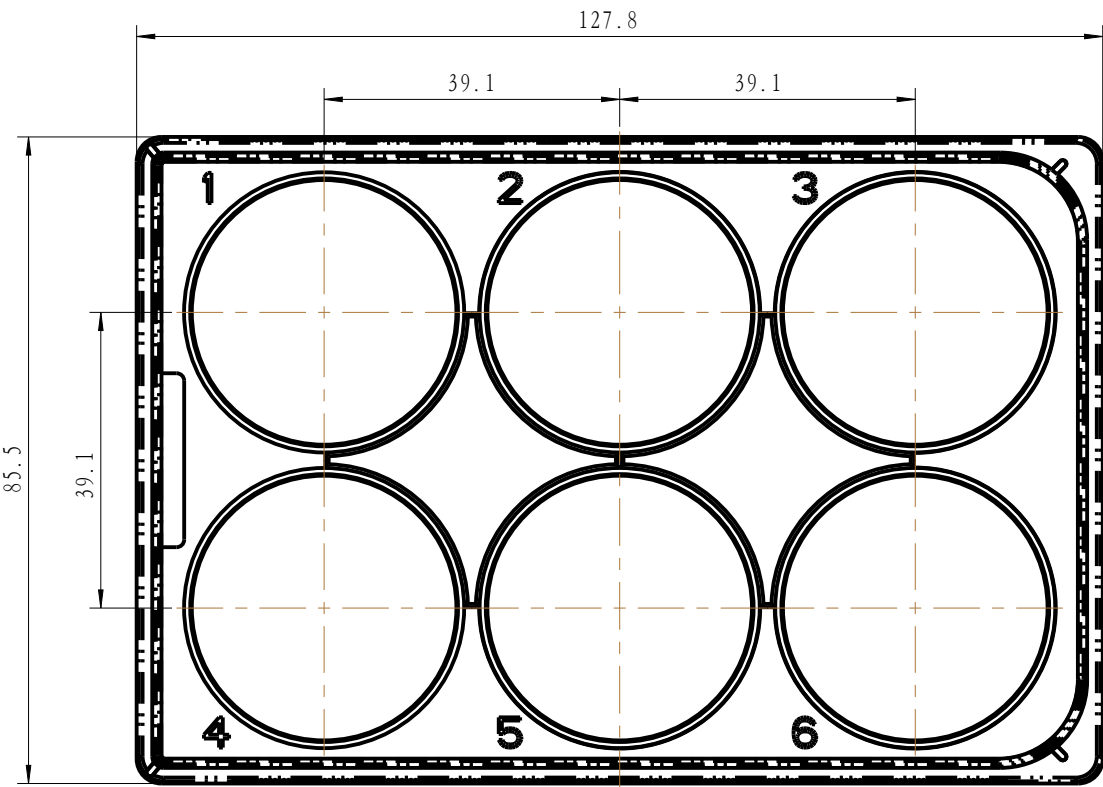

SEC A-A

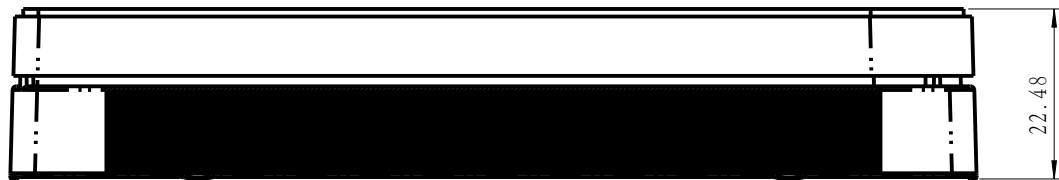

Note:

1. 未注公差 ± 0.1
2. 未注理论尺寸参照3D模型
3. 未注R角R0.1
4. 产品粗糙度要求为Ra0.01
5. 外观、表面干净，无肉眼可见的凹坑、划痕、气泡、夹杂物、麻点、擦痕、油污、汽纹、缩水、顶白、彩虹纹等缺陷
6. 浇口平滑无毛刺，不得有拉丝、可掉落的黑点及其他可见异物
7. 产品内部不可有残余应力
8. 培养面不可有结合线
9. 培养孔内具有亲水性，产品不可有内毒素

DESIGN BY:		 THE 3RD ANGLE	PART NAME: 6孔细胞培养板	MATERIAL: PS	MOLD NO:
CHECK BY:			PART NUMBER:	QUANTITY:	SCALE: 1:1
APPROVE BY:			SIZE: 127.8*85.5*20.2	2D DRAWN DATA: 2023.09.20	SHEETS NUMBER: 1/1